


ちつへきあつていこう
腔壁圧定鈎

Vaginal Retractor

上方へ圧挿する直線的な上葉と、下方へ圧挿する弯曲した形状の下葉に分かれている、狭い視野を展開するために用いられる腔鏡。

さんかちつへきあつていこう
産科腔壁圧定鈎

Obstetric Vaginal Retractor

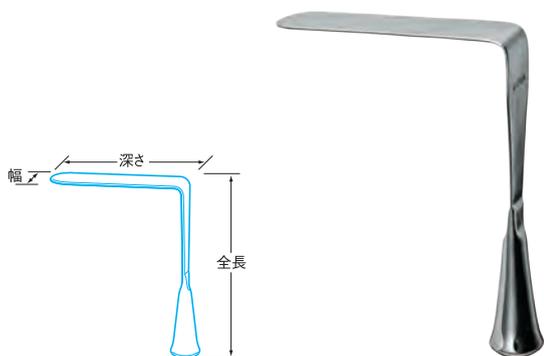

形状は大きく、先端は扁平で、腔式手術用として広く用いられる圧定鈎。

製品コード	幅	深さ	全長
17890	40mm	135mm	185mm


ステンレス製

通称名：ジモン

さんかちつきょう
産科腔鏡

通水用

Obstetric Vaginal Speculum

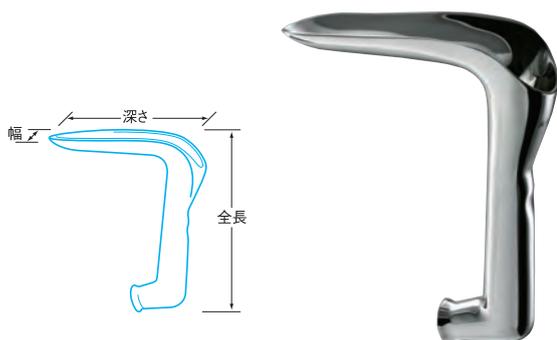

先端に浅い溝があり、柄が管状で手指が汚れないよう工夫された単弁腔鏡。

製品コード	幅	深さ	全長
17889	50mm	145mm	165mm


ステンレス製

通称名：ジモン

しきさんじよくようちつへきあつていこう

M.M式産褥用腔壁圧定鈎

M.M-Type Vaginal Retractor for Puerperia

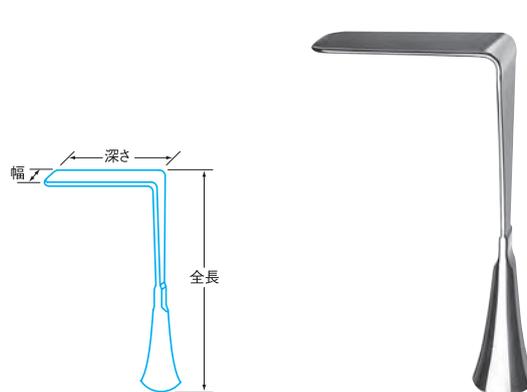

産褥用として作られた少し幅広の単弁圧定鈎。


製品コード	幅	深さ	全長
18267	44mm	92mm	185mm

ステンレス製

しきさんじよくようちつきょう

M.M式産褥用腔鏡

M.M-Type Vaginal Speculum for Puerperia

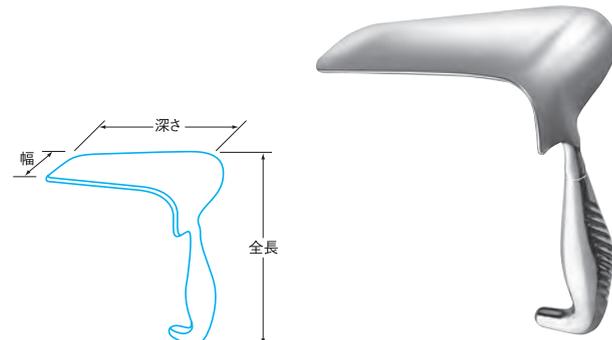

主に、分娩後の頸リス腔壁裂傷や胎盤遺残を点検・処理するために用いられる幅広の単弁腔鏡。

製品コード	サイズ	幅	深さ	全長
18251	L	60mm	150mm	170mm
18252	S	50mm	135mm	

ステンレス製


ちつへきあつていこう
腔壁圧定鈎

Vaginal Retractor

上方へ圧挿する直線的な上葉と、下方へ圧挿する弯曲した形状の下葉に分かれている、狭い視野を展開するために用いられる腔鏡。

きのしたちつへきあつていこう
木下腔壁圧定鈎

Kinoshita Vaginal Retractor

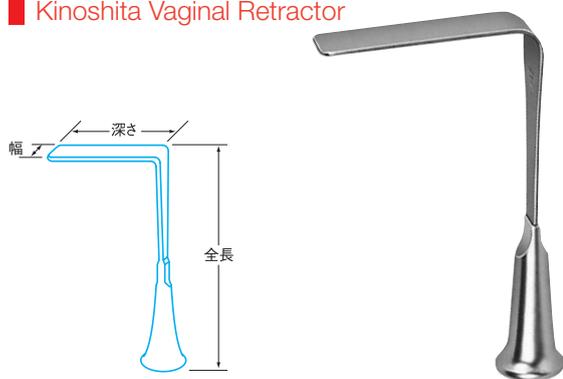

吾妻腔壁圧定鈎よりも、先端から柄にかけての角度を直角に曲げて作られている単弁圧定鈎。


製品コード	サイズ	幅	深さ	全長
18269	L	29mm	90mm	177mm
18270	M	25mm	85mm	
18271	S	21mm	81mm	

ステンレス製

組合せ例：下葉/クリステル腔鏡、上葉/木下腔壁圧定鈎

あすまちつへきあつていこう
吾妻腔壁圧定鈎

Azuma Vaginal Retractor

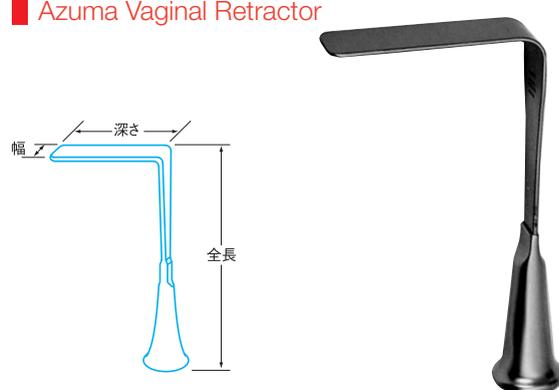

鈎全体は、細く短く、先端から柄にかけてはやや直角でやや丸い形状の単弁圧定鈎。


製品コード	サイズ	幅	深さ	全長
18272	L	29mm	88mm	155mm
18273	M	25mm	85mm	
18274	S	21mm	80mm	

ステンレス製

組合せ例：下葉/柳腔鏡、上葉/吾妻腔壁圧定鈎

クリステル腔鏡

Kristeller Vaginal Speculum

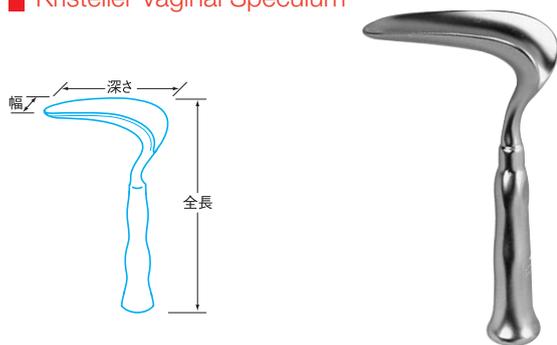

Kristellerをモデルとし日本人に適する大きさに改良された単弁腔鏡。

製品コード	サイズ	幅	深さ	全長
18263	L	37mm	95mm	165mm
18264	M	32mm	95mm	160mm
18265	S	27mm	90mm	

ステンレス製

組合せ例：下葉/クリステル腔鏡、上葉/木下腔壁圧定鈎

やなぎちつきょう
柳腔鏡 通水用

Yanagi Vaginal Speculum with Drain



ジモン氏腔鏡を基に日本人向けに改良された、柄が管状で手指が汚れない単弁腔鏡。

製品コード	サイズ	幅	深さ	全長
18253	L	37mm	100mm	130mm
18254	M	32mm	95mm	
18255	S	27mm	90mm	


ステンレス製

組合せ例：下葉/柳腔鏡、上葉/吾妻腔壁圧定鈎

きのしたしゅじゅつようちつへきあつていこう

木下手術用腔壁圧定鈎

Kinoshita Vaginal Retractor for Operation

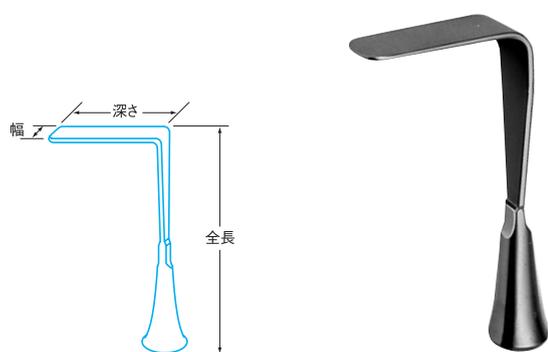

吾妻腔壁圧定鈎より大型で、産科手術向けに先端から柄が直角に曲がった単弁圧定鈎。

製品コード	幅	深さ	全長
18268	37mm	92mm	185mm

ステンレス製


あんどうしゅじゅつようちつぎょう

安藤手術用腔鏡

大小弁付

重錘付(1kg)

Ando Vaginal Speculum with Weight

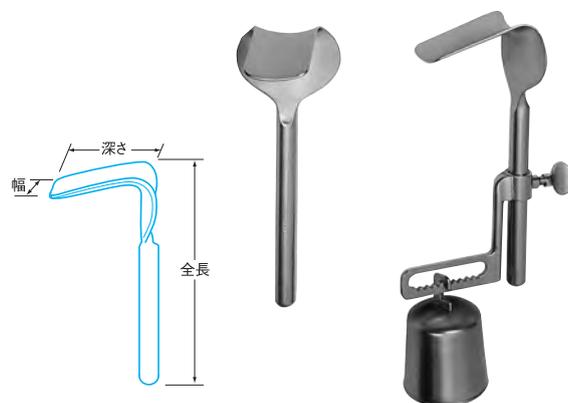

スライド金具と1kgの重量で介助者の手を省く、下葉の自持式腔鏡。


製品コード	サイズ	幅	深さ	全長
18256	大(L)	50mm	78mm	210mm
	小(S)	40mm	75mm	205mm

ステンレス製

きのしたしゅじゅつようちつぎょう

木下手術用腔鏡

Kinoshita Vaginal Speculum for Operation

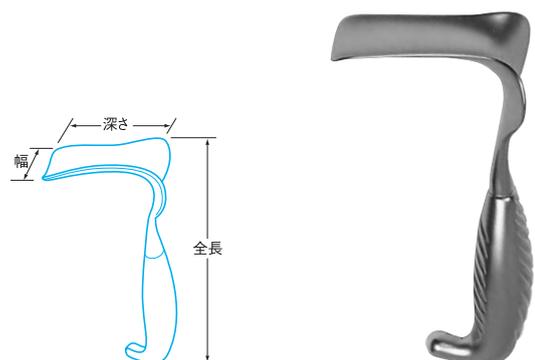

産科及び産褥の手術に適すよう、弁の幅を広く全長を長くした単弁腔鏡。

製品コード	サイズ	幅	深さ	全長
18261	LL	50mm	85mm	170mm
18262	L	45mm		165mm


ステンレス製

ちつへきあつていこう

腔壁圧定鈎

コーティング無

Lateral Vaginal Wall Retractor

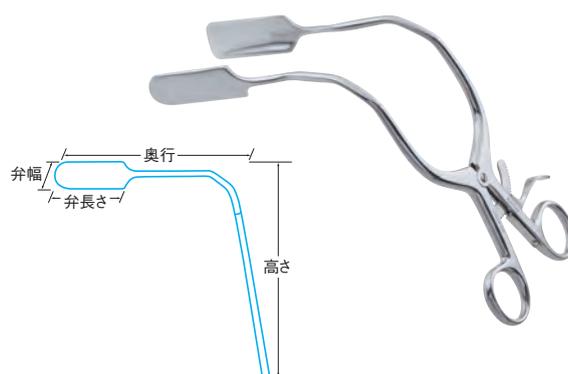

腔鏡と併用することで腔鏡内に腔壁が入り込むのを防ぐ2弁腔鏡。

製品コード	弁		奥行	高さ
	幅	長さ		
13395	22mm	55mm	138mm	170mm

ステンレス製

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

腔壁圧定鈎

17890	産科腔壁圧定鈎	11B1X00002Y38022	産科腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
18267	M.M 式産褥用腔壁圧定鈎	11B1X00002Y38024	M.M 式産褥用腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
17889	産科腔鏡	11B1X00002Y38028	産科腔鏡	アトムメディカル株式会社
18251	M.M 式産褥用腔鏡 L	11B1X00002Y38016	M.M 式産褥用腔鏡	アトムメディカル株式会社
18252	M.M 式産褥用腔鏡 S	11B1X00002Y38016	M.M 式産褥用腔鏡	アトムメディカル株式会社
18269	木下腔壁圧定鈎 L	11B1X00002X38001	木下腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
18270	木下腔壁圧定鈎 M	11B1X00002X38001	木下腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
18271	木下腔壁圧定鈎 S	11B1X00002X38001	木下腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
18272	吾妻腔壁圧定鈎 L	11B1X00002Y38021	吾妻腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
18273	吾妻腔壁圧定鈎 M	11B1X00002Y38021	吾妻腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
18274	吾妻腔壁圧定鈎 S	11B1X00002Y38021	吾妻腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
18263	クリステル腔鏡 L	11B1X00002Y38026	クリステル腔鏡	アトムメディカル株式会社
18264	クリステル腔鏡 M	11B1X00002Y38026	クリステル腔鏡	アトムメディカル株式会社
18265	クリステル腔鏡 S	11B1X00002Y38026	クリステル腔鏡	アトムメディカル株式会社
18253	柳腔鏡 通水用 /L	11B1X00002Y38025	柳腔鏡	アトムメディカル株式会社
18254	柳腔鏡 通水用 /M	11B1X00002Y38025	柳腔鏡	アトムメディカル株式会社
18255	柳腔鏡 通水用 /S	11B1X00002Y38025	柳腔鏡	アトムメディカル株式会社
18268	木下手術用腔壁圧定鈎	11B1X00002Y38023	木下手術用腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社
18256	安藤手術用腔鏡 重錘付	11B1X00002Y38027	安藤手術用腔鏡	アトムメディカル株式会社
18262	木下手術用腔鏡 L	11B1X00002Y38015	木下手術用腔鏡	アトムメディカル株式会社
18261	木下手術用腔鏡 LL	11B1X00002Y38015	木下手術用腔鏡	アトムメディカル株式会社
13395	腔壁圧定鈎 コーティング無	11B1X00002Y38001	腔壁圧定鈎	アトムメディカル株式会社

子宮消息子

18275	子宮消息子 先銀製 / 劃線付	11B1X00002Y53001	子宮消息子	アトムメディカル株式会社
18895	子宮消息子 高齢者診断用	11B1X00002Y53001	子宮消息子	アトムメディカル株式会社